



FREE NOSE® SEA WATER ISOTONIC WITH ALOE VERA AND HYALURONIC ACID - NASAL SPRAY

A proper nasal hygiene is important for adults, children and babies. The excess of mucus in the nasal cavities may increase the microbial proliferation and the excessive dryness of the nasal mucosa.

FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera and hyaluronic acid hydrates strongly nasal cavities thanks to its mechanical action and helps washing and extracting the mucus. The condition of the nasal mucosa is essential in breathing as it filters, humidifies and warms the air we breathe. There are certain occasions when nasal mucosa is altered: rhinitis due to flu, allergies, dry nostril after surgical processes, air conditioners or drugs treatments. Thanks to aloe vera which maintains and prolongs the hydration of the nasal passages and hyaluronic acid which high moisturizing power helps to restore nasal mucosa and promote its normal operation.

FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera and hyaluronic acid maintain the specificity of the vital properties of natural sea water. The sea water comes from the Bay of Cancale in Brittany, renowned for the quality of its water. The Bay of Cancale boasts an exceptional tidal range (12 m) and is swept by strong prevailing currents preventing pollution of the waters. This unique combination ensures that the water constantly cleans itself and is therefore consistently pure. Sampling is performed automatically when the water quality is optimal (after the high tide period). Sampling area is classified as a Class A and is under continuous health monitoring controls (microbiological, chemical contamination, phytoplankton, pH...).

Composition:

Purified water, sea water (sodium chloride 0.9%), Aloe Vera and sodium hyaluronate (0.2%).

Indications:

Proper use of **FREE NOSE® Sea Water with Aloe Vera and hyaluronic acid** in daily nasal hygiene of babies from 1 year, children and adults allows a therapeutic aid in some basic indications such as: nasopharyngitis, obstructive rhinitis and sinusitis, dry nose, hoarseness due to dry mucous membranes, adjuvant in ORL and pediatric treatment.

Instructions for use:

1. Gently insert the tip at the entrance of the nostril.
 2. Press the spray head.
 3. Allow to drain the excess solution in order to extract the mucus, and then blow.
 4. Repeat on the other nostril.
 5. Clean the tip with water and dry.
 6. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.
- Apply in each nostril as often as necessary.

Instructions to apply the product to the baby:

1. Lay your baby down with head slightly tilted to one side to facilitate the entry of sea water in the nostril.
 2. Pulverize during few seconds pressing the spray head.
 3. Sit up the baby to let the nose drain out. Collect mucus on a tissue.
 4. Repeat on the other nostril.
 5. Gently wipe around the nostrils without putting the tissue deep into the baby's nose. Clean the tip with water and dry.
- Apply to each nostril 2 to 3 times a day.

Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual doctor or pharmacist.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.
- At the indicated doses, no interactions are known. Similarly, it is recommended to consult with your habitual doctor if you are taking any medication.

Warnings and precautions:

- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- In case of a known or suspected allergy to any of the components of this medical device, it is advisable not to use.
- Keep out of reach of children.
- The source of hyaluronic acid is not of animal origin. It is obtained from bacterial fermentation.

Conservation and expiry date:

- Do not use the product after the expiry date shown on the box and the bottle.
- Maintain in a dry and cool place. Maintain below 40°C and protected from direct sunlight or other heat sources.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.
- It is recommended not to discard the box or the leaflet during the use of the product.

Presentation:


Pressurized spray bottle of 120 ml with nasal applicator in SOFT force.

Date of issue: 05/10/2023. Version 03

Knowing your experience with the product will allow us to grow



YSANA® VIDA SANA
PHARMALINK, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN
Customer service: +34 666 570 401
www.pharmalink.es

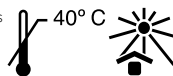

REF PL0141_120_Soft





FREE NOSE® AGUA DE MAR ISOTÓNICA CON ALOE VERA Y ÁCIDO HIALURÓNICO - ESPRAY NASAL

Una buena higiene nasal es importante tanto para niños como adultos. El exceso de mucosidad dentro de las cavidades nasales puede aumentar la proliferación microbiana o la sequedad excesiva de la mucosa nasal.

FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera y ácido hialurónico hidrata fuertemente las cavidades nasales gracias a su acción mecánica de lavado y extracción. El estado de la mucosa nasal es esencial para respirar, ya que filtra, humidifica y calienta el aire que respiramos. Existen ciertas ocasiones donde esta mucosa se ve alterada: rinitis debido a la gripe, alergias, sequedad en las fosas nasales después de procesos quirúrgicos, aires acondicionados o tratamientos con medicamentos.

Gracias al aloe vera mantiene y prolonga la hidratación de las fosas nasales y ácido hialurónico, que con su alto poder hidratante ayuda a restaurar la mucosa nasal y a promover su buen funcionamiento.

FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera y ácido hialurónico conserva la especificidad de las propiedades vitales del agua de mar natural.

El agua de mar proviene de la Bahía de Cancale en Bretaña, conocida por la calidad de sus aguas. La bahía de Cancale se caracteriza por mareas excepcionales (12 m) y es arrastrada por fuertes corrientes que previenen la contaminación de sus aguas. Esta combinación única garantiza que el agua se auto-limpie constantemente y que sea particularmente pura. La toma de muestras se efectúa automáticamente cuando la calidad del agua es óptima (después del periodo de marea alta). La zona de toma de muestras se clasifica como clase A y está sometida a vigilancias y controles sanitarios continuos (microbiológicos, contaminación química, fitoplancton, pH...).

Composición:

Agua purificada, agua de mar (0,9% de cloruro de sodio), Aloe Vera y hialuronato de sodio (0,2%).

Indicaciones:

Un buen uso de **FREE NOSE® Agua de Mar con Aloe Vera y ácido hialurónico** en la higiene nasal cotidiana de bebés a partir de 1 año, niños y adultos, permite una ayuda terapéutica en algunas indicaciones básicas como nasofaringitis, rinitis obstructiva y sinusitis, nariz seca, ronquera debido a mucosas secas, coadyuvante en los tratamientos ORL y pediátricos.

Modo de empleo:

1. Introducir cuidadosamente la punta del aplicador en un orificio nasal.
2. Presionar el cabezal del pulverizador.
3. Dejar drenar el exceso para extraer la mucosidad, después sonarse.
4. Repetir en el otro orificio.
5. Limpiar el aplicador con agua y secar.
6. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.

Aplicar en cada orificio nasal tantas veces como sea necesario.

Instrucciones para aplicar el producto al bebé:

1. Acueste a su bebé con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado para facilitar la entrada del agua de mar en la cavidad nasal.
2. Presione la bomba y pulverice el producto durante unos segundos.
3. Siente al bebé para dejar drenar el exceso. Recoger el moco con un tejido.
4. Repita el proceso en el otro orificio.
5. Cuidadosamente limpie alrededor de las fosas nasales sin introducir el tejido profundamente en la nariz del bebé. Limpie el aplicador con agua y séquelo. Aplicar en cada fosa nasal de 2 a 3 veces al día.

Contraindicaciones y efectos adversos:

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- Cualquier incidente adverso relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor y a la Autoridad Sanitaria competente (AEMPS).
- A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

Advertencias y precauciones:

- Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- La fuente de ácido hialurónico no es de origen animal. Se obtiene a partir de la fermentación bacteriana.

Conservación y fecha de caducidad:


- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.
- Se recomienda no desechar la caja ni el prospecto durante el uso del producto.

Presentación:

Botella de spray presurizado de 120 ml con aplicador nasal de fuerza SUAVE.

Fecha de emisión: 05/10/2023. Versión 03

Conocer tu experiencia con el producto nos permitirá crecer

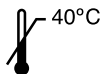

REF PL0141_120_sotf

